

# INFO

WSW Elastomertechnik GmbH  
Parkplatz 2  
D-04579 Espenhain / OT Mölbis  
Telefon: 034347-82 90  
Telefax: 034347-82 999

Internet:  
[www.wsw-gmbh.de](http://www.wsw-gmbh.de)

E-Mail:  
[info@wsw-gmbh.de](mailto:info@wsw-gmbh.de)

## Die Wirkungsweise

Durch Öffnen der Facettengelenke und der hinteren Bandscheibenfächer werden die Muskulatur und der Bandapparat gedehnt...



...die Nerven haben wieder mehr Platz - hierdurch entstehen Entspannung und Schmerzlinderung.

## Die Anwendung

Täglich nur ca. 10 min. auf ROLFI legen. Die Mitte der Rolle sollte ca. 5 cm unterhalb des Bauchnabels sein. Der Neoprenkörper muss hierbei mittels der Handpumpe soweit aufgepumpt werden, dass im Rückenbereich ein leichter Zug entsteht. Nach jeweils ca. 2 Min. sollte leicht nachgepumpt werden, damit die Muskulatur immer gut gedehnt wird.



# Rückenschmerz muss nicht sein

- kinderleichte Anwendung
- fast überall einsetzbar
- für die ganze Familie
- sehr effektiv und hilfreich



patentrechtlich geschützt

### Bestellschein

Hiermit bestelle ich \_\_\_\_\_ Stück Rolfi - mein Rückenfreund - zum Preis von 138,- € (einschließlich der gesetzl. gültigen Mehrwertsteuer zuzüglich 7,- € Versandkosten). Die Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang. (Sie erhalten von uns eine Rechnung)  
Bitte vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen.

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_ Hausnummer \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Geb.-Datum \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Ich wünsche die Farbe:  Grün  Blau  Rot

Ort, Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

Widerrufsrecht:  
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief oder Fax) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Warnung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.  
WSW Elastomertechnik GmbH • Parkplatz 2 • D-04579 Espenhain/OT Mölbis

Intern-Code \_\_\_\_\_

falls Marke zur Hand bitte frankieren.

Firma  
WSW Elastomertechnik GmbH  
Parkplatz 2

D-04579 Espenhain / OT Mölbis

ROLFI - ein therapeutisches Gerät zur Linderung Ihrer Rücken-, Hüft-, und Beinschmerzen.

Kinderleicht, einfach und überall einsetzbar.

Nur ca. 10 min. täglich angewendet, kann ROLFI die Ursache einer Vielzahl von Schmerzsyndromen deutlich reduzieren !

ROLFI ist Ihr genialer Helfer für die tägliche Selbsttherapie

Gummi-  
profil



robuster, durch  
Aufpumpen  
individuell  
regulierbarer  
Neoprenkörper

Handpumpe mit  
Ablassventil

(patentrechtlich geschützt)

Lindern Sie Ihre Rückenschmerzen selbst - und werden Sie dadurch wieder aktiver und beweglicher !

## Das Problem

Rückenschmerz ist die Volkskrankheit Nr. 1. Fast jeder Bundesbürger hat in seinem Leben ab und zu - oder sogar chronisch mit dem Rücken Probleme. Hierbei können verschiedene Ursachen verantwortlich sein - als Auswirkung kommt der ungeliebte Schmerz!

Wird dieses Signal des Körpers nun ignoriert, oder nur durch Tabletten eingedämmt, bleibt die Ursache erhalten.

Der oft jahrelange Leidensweg beginnt ...

## Die Lösung

Deutsche Schmerzspezialisten haben aus Jahre-langer Erfahrung ROLFI entwickelt. Ziel ist es, dass der Patient sich selbst ohne großen Aufwand helfen und therapieren kann. Die Anwendung sollte jedoch unter regelmäßiger Kontrolle Ihres Arztes stattfinden.


Nur 10 Minuten tägliche Anwendung können ca 50 - 60 % der Beschwerden im unteren Rückenbereich deutlich lindern - in einigen Fällen verschwindet der Schmerz sogar ganz !

*Rolfi*



## Die Anwendungsbereiche\*\*

- Ischialgie
- Lumbago
- Knieschmerzen
- Beinschmerzen
- Fußschmerzen
- Hüftgelenksschmerzen
- Beschwerden im unteren Rückenbereich
- ...und noch vieles mehr

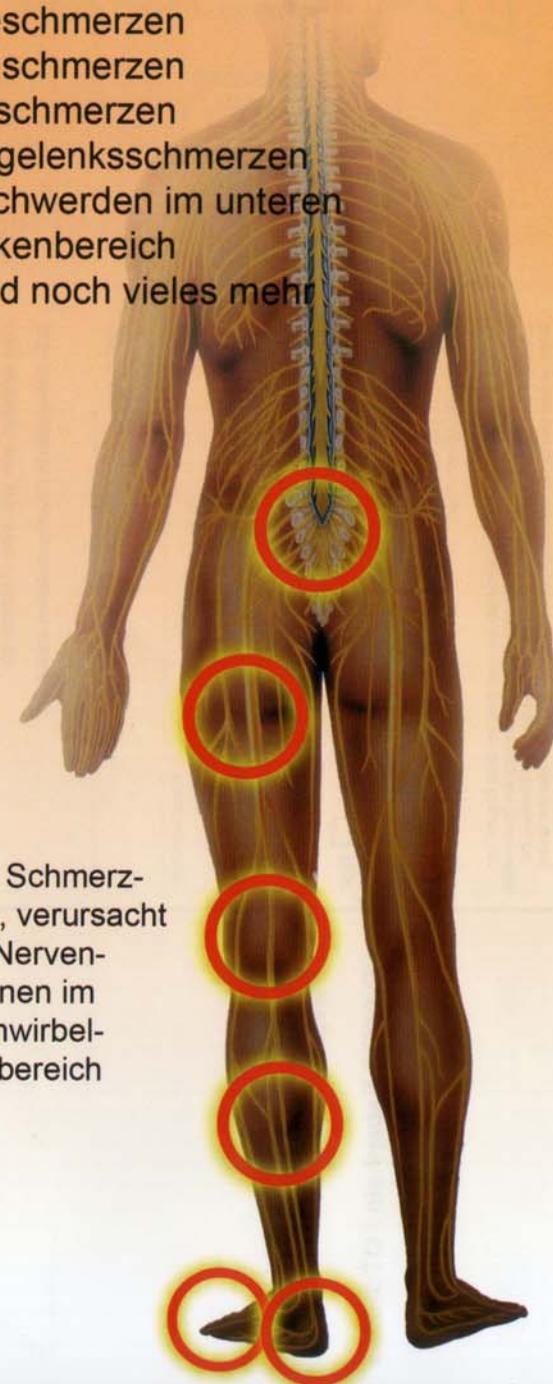

\*\* mgl. Schmerzpunkte, verursacht durch Nervenirritationen im Lendenwirbelsäulenbereich